

Запасные части

Оголовье CARA
с зажимами ремней оголовья
XS: WM 25191
Стандарт: WM 25192



Оголовье CARA Full Face
с зажимами ремней оголовья
WM 25243



Подушка маски CARA
Разм. XS: WM 25189
Разм. S/M: WM 25238
Разм. M/L: WM 25239



Подушка маски CARA Full Face
Разм. S: WM 25601
Разм. M: WM 25602
Разм. L: WM 25603



шнур для экстренного снятия CARA Full Face
WM 25623



Дополнительная информация о наших терапевтических решениях, принадлежностях и системах масок имеется на сайте loewensteinmedical.de

Технические данные

	CARA	CARA Full Face
Класс продукта согласно Директиве 93 / 42 / ЕЭС	II a	II a
Размеры (ширина x высота x глубина)	72 x 112 x 70 мм (размер XS) 72 x 117 x 70 мм (размер S/M) 72 x 118 x 70 мм (размер M/L)	93 мм x 145 мм x 89 мм (размер S) 95 мм x 160 мм x 90 мм (размер M) 95 мм x 174 мм x 91 мм (размер L)
Масса	58 г (размер XS) 59 г (размер S/M) 60 г (размер L/M)	93 г (размер S) 97 г (размер M) 102 г (размер L)
Терапевтическое давление	4 гПа – 30 гПа	4 гПа – 25 гПа
Подключение трубки: конус согласно EN ISO 5356-1	Ø 22 мм (штекер)	Ø 22 мм (штекер)
Диапазон температур • при работе: • при хранении:	от +5 °С до +40 °С от -20 °С до +70 °С	от +5 °С до +40 °С от -20 °С до +70 °С
Аэродинамическое сопротивление • при 50 л/мин • при 100 л/мин	0,2 гПа 0,9 гПа	0,15 гПа 0,5 гПа
Аэродинамическое сопротивление аварийного выдыхательного клапана • вдох при 50 л/мин • выдох при 50 л/мин	-	0,6 гПа 0,8 гПа
Звуковое давление аварийного выдыхательного клапана • при раскрытии: • при закрытии:	-	0,5 гПа 2,2 гПа
Указанное двузначное значение шумовыделения согласно ISO 4871: • уровень звукового давления: • уровень звуковой мощности: • погрешность:	18 дБ(A) 26 дБ(A) 3 дБ(A)	19 дБ(A) 27 дБ(A) 3 дБ(A)
Срок службы	до 12 месяцев ¹	до 12 месяцев ¹
Применимые нормы	EN ISO 17510-2:2009	EN ISO 17510-2:2009

¹ Материалы, используемые для изготовления масок, стареют, например, при воздействии агрессивных средств очистки. Поэтому в ряде случаев может потребоваться заменить детали маски раньше.

CE 0197

Обозначение изделия	Размер	№ артикула	Обозначение изделия	Размер	№ артикула
CARA Nasal	XS	WM 25590	CARA Full Face	S	WM 25630
CARA Nasal	S/M	WM 25600	CARA Full Face	M	WM 25640
CARA Nasal	M/L	WM 25610	CARA Full Face	L	WM 25650



Löwenstein Medical Technology
Kronsaalweg 40, 22525 Hamburg
Германия
Тел.: +49 40 54702-0
Ф: +49 40 54702-461
info@loewensteinmedical.de
www.loewensteinmedical.de

LLC Löwenstein Medical Rus
Kosmonavta Volkova street,
House 6A, floor 2, room 42
127299 Moscow
Russia
LMRussia@loewensteinmedical.de
ru.hul.de



© Авторские права защищены. Размножение любого рода допускается только с конкретного разрешения фирмы Löwenstein Medical Technology. Исходный текст печатается, все сведения предоставлены без гарантии.



p10136nu0001

НОВЫЙ
CARA Full Face
CARA XS



CARA
Превосходный сон.





CARA Превосходный сон.

Идеальная подгонка, высокая степень комфорта для пациента, приятный и легкий выдох, оптимальная совместимость с кожей – назальные и рото-носовые маски CARA современного образца соответствуют всем этим требованиям.

Наши маски CARA убеждают пользователей своей легкостью, мягко и точно прилегающей подушкой, удобной регулировкой и другими продуманными деталями.

Маски серии CARA – это оптимальное решение практически для всех пользователей.



Подушка маски – точная подгонка и прочность крепления

Первое впечатление верно. Подушка маски мягкая, эластичная и комфортно прилегает к коже. При этом она прочно фиксируется на лице и в точности подходит к его контурам – оптимально для длительного комфортного пользования, причем даже без налобной подушки.

Проверенное совершенство – не нарушая тишину

Выдыхательная система щелевого типа, расположенная рядом с шарнирным сочленением, используется на практике на протяжении десятилетий. В масках серии CARA она дополнительно усовершенствована. Благодаря меньшему количеству частей облегчается пользование, уменьшен вес и улучшены экологические характеристики за счет сокращения производства и утилизации материалов.

Сохранены диффузный выдох, чтобы не беспокоить пациента и лежащего рядом в кровати, а также верхняя закрытая зона, чтобы выдыхаемый воздух не выходил в направлении глаз.

Маска CARA – признанный победитель

Не только на вас маска CARA произвела такое сильное впечатление. Наша маска также завоевала международно признанные награды за дизайн Focus Open и German Design Award.


Качество изделий подтверждено также независимым сертификационным центром Hohenstein. Только безупречные текстильные материалы, не содержащие вредных для здоровья веществ, удостоены признанного в мире знака OEKO-TEX STANDARD 100 – в том числе оголовье серии CARA.



Focus Open 2018
Special Mention
BADEN-WÜRTTEMBERG
INTERNATIONAL DESIGN AWARD

Преимущества серии CARA

- Мягкая, комфортно прилегающая подушка маски – в 3 размерах
- Малошумная и диффузная выдыхательная система **1a**, **1b**
- Малый вес **2**
- Оголовье с цветным кодированием – цветная зона (сине-зеленый или шираз) вверху
- Возможность регулировки верхнего наголовника для идеальной фиксации при любом размере головы **3**
- Выбор между вставным или постоянным креплением **4a**, **4b**
- Шнур для экстренного снятия маски **5**
- Шарнирное сочленение с вращением на 360° и 3D для неограниченной свободы движения **6**
- Чрезвычайно прочный материал

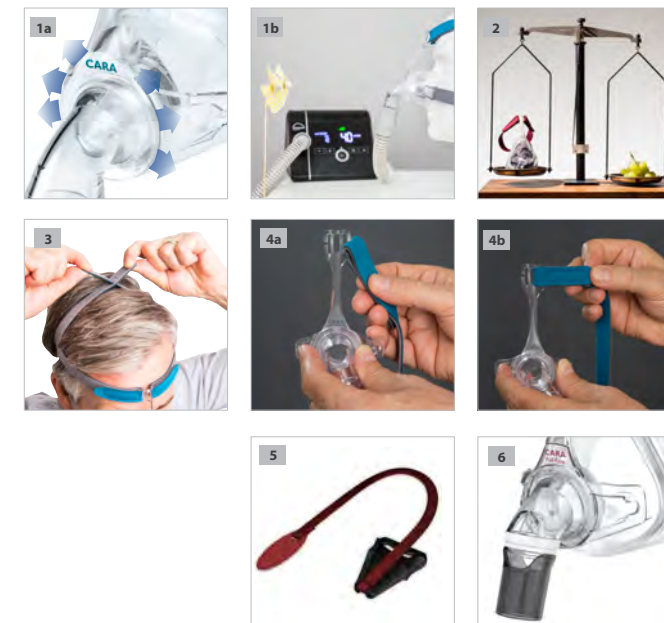

Просто наденьте CARA.



Снимите с маски оба зажима.



Наденьте оголовье на голову.



Закрепите зажимы снизу на маске.



Установите верхние оголовья как можно свободнее, но настолько прочно, как это требуется.



Установите нижние наголовники как можно свободнее, но при этом настолько прочно, как это требуется.



Отрегулируйте оголовье на голове так, чтобы оно внизу не касалось мочек ушей.



Установите налобник как можно свободнее, он не должен прилегать.



Наш видеоролик для пользователей имеется в YouTube.

CARA – сделано в Германии